

Intended Purposes

The device is used to safely and evenly divide pills for an equal amount of ingredients in each piece, by cutting or by crushing pills into powder. Whole, cut, or crushed pills can also be stored in the unit.

Indications Facilitate swallowing of medications.

Contra Indications Improper dosage from bad split, cross-contamination of different drugs, allergic reaction from residue contamination.

Caution: The top chamber includes a built-in safety shield which hides the sharp blade when the lid is opened.

Instructions for Use

Splitting Pills: Open top of splitter. Position pill in the cutting area so it rests centrally flush against the upper chamber. Lower top and close firmly to split pill. If the pill is oblong, cut across the pill, not longitudinally.

Crushing Pills: Unscrew the top of crushing unit and place desired pill dose into the crushing chamber. Replace the top on and twist until pills are crushed into a fine powder. As necessary, store ground pill in the chamber.

Warning: Pill splitter utilizes a blade. Do not place fingers on blade or in compression area to avoid injury. Keep Pill Pal out of the reach of children.

Instructions for Care

Cleanse with soap and water. Air dry.

Usages prévus

Le dispositif est utilisé pour diviser les pilules en quantité égale d'ingrédients, en les coupant ou broyant sous forme de poudre. Les pilules entières, coupées ou broyées peuvent aussi être conservées dans le dispositif.

Indications Facilite l'absorption des médicaments.

Contre-indications Dosage incorrect dû à un mauvais fractionnement, contamination croisée de médicaments différents, réaction allergique liée à la contamination des résidus.

Attention : le compartiment du haut est muni d'un écran protecteur qui dissimule la lame coupante lorsque le couvercle est ouvert.

Mode d'emploi

Fractionnement des pilules : ouvrez le couvercle du coupe-pilule. Placez la pilule dans la zone de coupe, au milieu et à plat contre le compartiment du haut. Rabattez le couvercle et appuyez fermement dessus pour couper la pilule. Si la pilule est oblongue, coupez-la dans le sens transversal, et non longitudinal.

Broyage des pilules : dévissez le couvercle du broyeur et placez la dose de pilule désirée dans le compartiment de broyage. Remettez le couvercle en place et vissez jusqu'à ce que les pilules soient broyées en une fine poudre. Si nécessaire, conservez la pilule broyée dans le compartiment.

Avertissement : le coupe-pilule utilise une lame. Ne placez pas les doigts sur la lame ou dans la zone de compression pour éviter de vous blesser. Tenez le Pill Pal hors de portée des enfants.

Instructions d'entretien

Lavez avec de l'eau et du savon. Laissez sécher à l'air.

Fines previstos

El producto se utiliza para dividir de forma segura las pastillas cortándolas o triturándolas en partes iguales con la misma cantidad de ingredientes en cada una. Las pastillas enteras, cortadas o trituradas también se pueden conservar en la unidad.

Indicaciones Facilitar la ingestión de medicamentos.

Contraindicaciones Dosificación incorrecta como consecuencia de una división errónea, contaminación cruzada de diferentes medicamentos, reacción alérgica por contaminación residual.

Precaución: La cavidad superior incluye un escudo de seguridad integrado que oculta la hoja afilada al abrir la tapa.

Instrucciones de uso

Dividir pastillas: abra la tapa del divisor. Coloque la pastilla en la zona de corte de manera que quede centrada con respecto a la cavidad superior. Baje la tapa y cierre con firmeza para cortar la pastilla. Si la pastilla es ovalada, córtela en sentido transversal, no longitudinal.

Triturar pastillas: desenrosque la tapa de la unidad de trituración y coloque la dosis deseada de la pastilla en la cavidad de trituración. Vuelva a colocar la tapa y retuerza hasta que las pastillas se hayan triturado formando un polvo fino. Guarde la pastilla triturada en la cavidad según sea necesario.

Advertencia: El divisor de pastillas utiliza una cuchilla. No ponga los dedos sobre la cuchilla o en una zona de compresión para evitar accidentes. Mantenga Pill Pal fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para el cuidado

Lavar con agua y jabón. Dejar secar al aire.

Verwendungszwecke

Mit diesem Produkt lassen sich Tabletten auf sichere Weise halbieren. Somit enthält jedes Stück die gleiche Menge an Inhaltsstoffen. Die Tablette wird geteilt oder zermahlen. Im Depotfach können auch ganze, geteilte oder zermahlene Tabletten aufbewahrt werden.

Indikationen Erleichtern der Medikamenten-einnahme.

Kontraindikationen Falsche Dosierung durch unpräzise Teilung, Kreuzkontamination durch unterschiedliche Arzneimittel, allergische Reaktion bei Verunreinigung durch Rückstände.

Achtung: Bei geöffnetem Deckel verdeckt der integrierte Klingenschutz in der oberen Kammer ein scharfes Teilmesser.

Gebrauchsanweisung

Tabletten teilen: Deckel des Tablettenteilers öffnen. Die Tablette so in den Schneidebereich einlegen, dass sie in der Mitte flach auf dem Boden der oberen Kammer aufliegt. Zum Teilen der Tablette den Deckel senken und fest schließen. Eine längliche Tablette in der Mitte quer teilen und nicht der Länge nach.

Tabletten zermahlen: Deckel der Mahlkammer abschrauben und die gewünschte Tablettendosis hineinlegen. Deckel wieder einschrauben und so lange drehen, bis die Tabletten feinpulvrig zermahlen sind. Zermahlene Tablette je nach Bedarf im Depotfach aufbewahren.

Warnhinweis: Der Tablettenteiler enthält eine Klinge. Finger von der Klinge und vom Zerteilungsbereich fernhalten. Es besteht Verletzungsgefahr. Den Tablettenteiler für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Pflegeanleitung

Mit Wasser und Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen.

Avsedd användning

Produkten är avsedd för att säkert och jämnt dela tabletter så att varje del innehåller lika stor mängd beståndsdelar, genom att dela tabletter eller krossa dem till ett pulver. Hela, delade eller krossade tabletter kan också förvaras i produkten.

Indikationer Avsedd för att underlätta nedsväljning av mediciner.

Kontraindikationer Felaktig dosering på grund av felaktig delning, korskontaminering av olika typer av läkemedel, allergisk reaktion på grund av kontaminering från rester.

Försiktighet! Den övre kammaren är försedd med ett inbyggt skydd som döljer det vassa bladet när locket öppnas.

Bruksanvisning


Dela tabletter: Öppna locket på delaren. Placera tabletten i det skärande området så att den är centrerad och vilar mot den övre kammaren. Sänk ned och stäng locket med fast hand för att dela tabletten. Om tabletten har en avlång form, dela den på tvären, inte på längden.

Krossa tabletter: Skruva av locket på krossningsenheten och lägg tabletten ifråga i krossningskammaren. Sätt tillbaka locket och vrid tills tabletten är krossad till ett fint pulver. Förvara den krossade tabletten i kammaren, efter behov.

Varning! Tablettedelen är försedd med ett knivblad. För att undvika skador får fingrar inte placeras på knivbladet eller i delningsutrymmet. Förvara Pill Pal oåtkomlig för barn.

Skötselanvisningar

Rengör produkten med tvål och vatten. Lufttorkas.

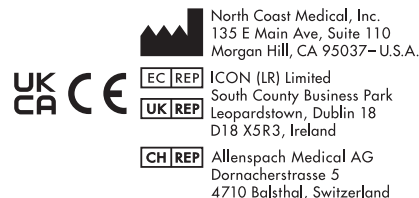

Made in China • Fabricado en China • Fabriqué en Chine
Hergestellt in China • Tillverkas i Kina

92100IFU-137-V1.0 2023