

# Norco® Pill Pal™ Splitter

## Intended Purposes

This handy device divides pills and stores in the body of the unit, while keeping fingers safe.

**Indications** Pills which require splitting or storage for later use.

**Contraindications** Liquid, capsule, or chalky textured pills. Unintended mixing of pill residue.

## Instructions for Use

To split pills: Open top of splitter and position pill in cutting area. Lower top and close firmly.

**Warning:** Sharp blade. Do not press finger against blade. For adult use only. Not suitable for children.

**Instructions for Care** Cleanse with soap and water. Air dry.

---

# Divisor Pill Pal™ de Norco®

## Fines previstos

Este práctico dispositivo sirve para dividir y almacenar pastillas en la unidad y evitar el peligro para los dedos.

**Indicaciones** Dividir y guardar pastillas para usarlas en otro momento.

**Contraindicaciones** Pastillas líquidas, cápsulas o con textura calcárea. Mezcla accidental de residuos de las pastillas.

## Instrucciones de uso

Para dividir pastillas: abra la tapa del divisor y coloque la pastilla en la zona de corte. Baje la tapa y ciérrela con firmeza.

**Advertencia:** Cuchilla afilada. No presione el dedo contra la cuchilla. Para uso exclusivamente por parte de adultos. No apto para niños.

**Instrucciones para el cuidado** Lavar con agua y jabón. Dejar secar al aire.

---

# Coupe-pilule Norco® Pill Pal™

## Usages prévus

Ce dispositif pratique coupe les pilules et les conserve dans son boîtier, sans risque pour les doigts.

**Indications** Fractionnement ou conservation des pilules pour un usage ultérieur.

**Contre-indications** Capsules remplies de liquide, gélules ou pilules à texture crayeuse. Mélange accidentel de résidus de pilule.

## Mode d'emploi

Pour couper des pilules : ouvrez le couvercle du coupe-pilule et placez la pilule dans la zone de coupe. Rabattez le couvercle et appuyez fermement dessus.

**Avertissement :** lame acérée. N'appuyez pas les doigts contre la lame. Pour adultes seulement. Ne convient pas aux enfants.

**Entretien** Nettoyez avec de l'eau et du savon. Laissez sécher à l'air.

# Norco® Pill Pal™ Tabletteiler

## Verwendungszwecke

Diese praktische Vorrichtung dient zum Halbieren von Tabletten, die dann im Depotfach aufbewahrt werden können. Die Finger bleiben vor Verletzungen geschützt.

**Indikationen** Tabletten, die geteilt oder für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden müssen.

**Kontraindikationen** Weichgelatine kapseln, Hartkapseln und leicht zerbröselnde Tabletten. Versehentliches Vermischen von Tablettenrückständen.

## Gebrauchsanweisung

Tabletten teilen: Deckel des Tabletteilers öffnen und Tablette in den Schneidbereich einlegen. Deckel senken und fest schließen.

**Warnhinweis:** Scharfe Klinge. Finger von der Klinge fernhalten. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene. Für Kinder nicht geeignet.

**Pflegeanleitung** Mit Wasser und Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen.

---

# Norco® Pill Pal™ tabletdelare

## Avsedd användning

Denna praktiska produkt delar tabletter och förvarar dem inuti enheten, samtidigt som den skyddar fingrarna.

**Indikationer** Avsedd för tabletter som behöver delas eller förvaras för senare användning.

**Kontraindikationer** Ej avsedd för kapslar med flytande innehåll, andra kapslar eller tabletter utan överdrag med kritliknande struktur. Oavsiktlig blandning av tablettrester.

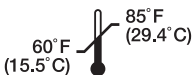
## Bruksanvisning

Dela tabletter: Öppna locket på delaren och placera tabletten i skärområdet. Sänk ned och stäng locket med fast hand.



**Varning!** Vasst knivblad! Tryck inte fingret mot bladet. Endast avsedd att användas av vuxna. Ej lämplig för barn.

**Skötselansvisningar** Rengör produkten med tvål och vatten. Lufttorkas.

**REF** NC92101



 North Coast Medical, Inc.  
135 E Main Ave, Suite 110  
Morgan Hill, CA 95037–U.S.A.

  ICON (LR) Limited  
South County Business Park  
Leopardstown, Dublin 18  
D18 X5R3, Ireland

 Allenspach Medical AG  
Dornacherstrasse 5  
4710 Balsthal, Switzerland

Made in China • Fabricado en China • Fabriqué en Chine  
Hergestellt in China • Tillverkas i Kina

92101IFU-141-V1.0 2023